

5. メンテナンス業務編：処置関連チェックOFFメンテナンスについて

処置関連チェックOFFメンテナンスとは、標準で提供している処置関連チェックをOFF（チェックがかからなくなる）に設定できる機能です。

● 処置関連チェックOFFメンテナンスの起動

- 1 メインメニューより【メンテナンス】→【処置関連チェックOFFメンテナンス】をクリックします。



- 2 「処置関連チェックOFFツール」画面が開きます。

処置関連チェックをOFFに設定したい年月を選択し、【確定】をクリックします。




対象年月はマシン日付（当月）で表示されます。

- 3 処置関連チェックコード一覧が表示されます。



● 「処置関連チェックOFFツール」画面説明

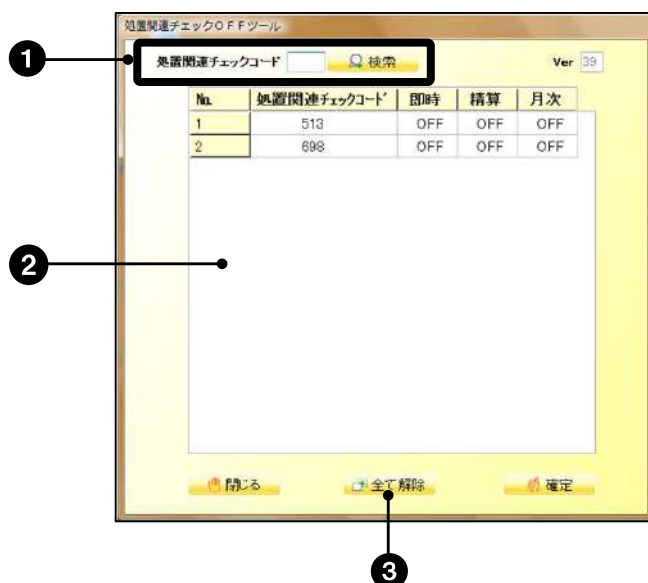

1 【検索】

3ケタの処置関連チェックコードを入力して【検索】をクリックすると、一覧に追加されます。



3ケタの処置関連チェックコードとは、エラーメッセージの先頭に表示されている下3ケタの数字のことです。

例)

精算時エラーメッセージ (10月16日件数 : 1 / 1)									
256-20698			7	6	5	4	3	2	1
			1	2	3	4	5	6	7
			7	6	5	4	3	2	1
			1	2	3	4	5	6	7

この場合は“698”が処置関連チェックコードとなります。

2 処置関連チェックコード一覧

OFFに設定した処置関連チェックコードの一覧が表示されます。



“OFF”が表示されている欄をダブルクリック(または [Enter])すると、ON/OFFを切り替えることができます。
(ONに設定したものはチェックがかかります。)

	即時	精算	月次
	OFF	OFF	OFF
	OFF	ON	OFF

ダブルクリック

3 【全て解除】


一覧に表示されている処置関連チェックコードを全て“ON”にします。



処置関連チェックコードを全て“ON”にしたあと【確定】をクリックすると、一覧から削除されます。

処置関連チェックをOFFに設定する

例) 処置関連チェックコード“698”をOFFに設定する。

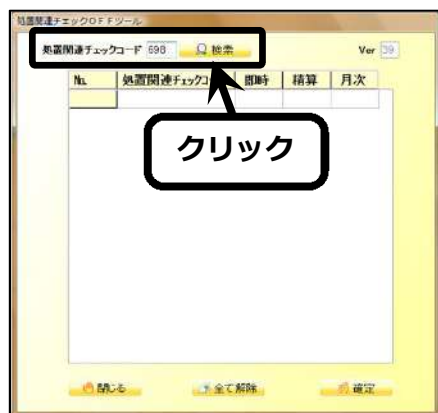


- 1 「処置関連チェックOFFツール」画面の「処置関連チェックコード」欄に3ケタの処置関連チェックコードを入力し、【検索】をクリックします。

(この場合は「処置関連チェックコード」欄に“698”と入力し、【検索】をクリック)



- 2 「処置関連チェックコード【XXX】で新規に追加します。よろしいですか?」と表示されます。

【はい】をクリックします。

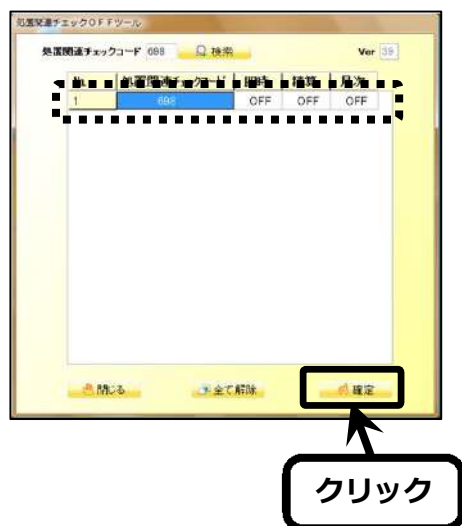

- 3 一覧に処置関連チェックコードが追加されます。




初期表示は全て“OFF”になっています。
“ON”にする場合は“OFF”の欄をダブルクリック
(または [Enter]) して変更してください。



続けて処置関連チェックコードを追加したい場合は、
手順1～2を繰り返してください。

内容を確認して【確定】をクリックします。

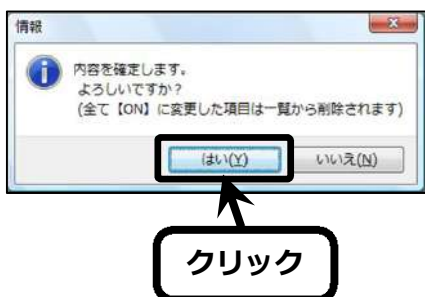

- 4 「内容を確定します。よろしいですか?」と表示されます。
【はい】をクリックします。